

Brochure produit

04.09.2026

KERN SET-18

FRANÇAIS

Software EasyTouch


SET-18

**Container
Master**

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

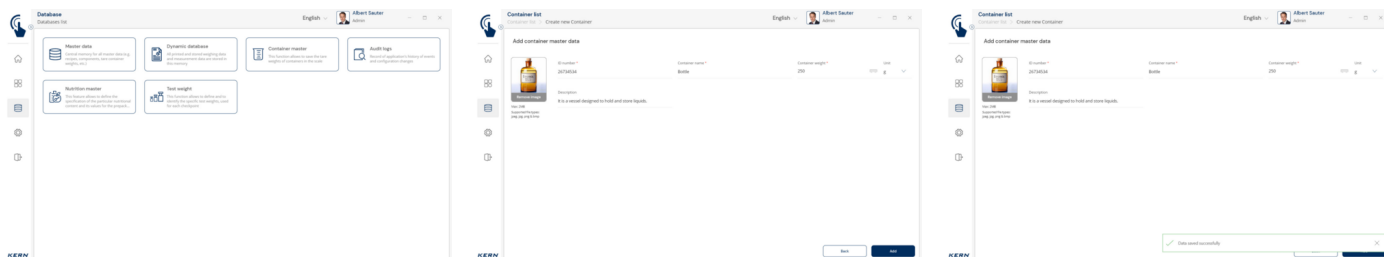

CARACTÉRISTIQUES

- Remarque : le programme de base SET-01 Base est nécessaire pour cette set
- Gestion des conteneurs : différents articles sont stockés et pesés dans des conteneurs de même type. Les tares de ces conteneurs peuvent être gérés centralement avec SET-18 Container Master. Si le poids d'un conteneur change, la nouvelle tare est simplement mise à jour dans Container Master et automatiquement appliquée à tous les articles et fonctions correspondants de l'application
- Affectation fixe : un conteneur peut être attribué à chaque objet de données de base afin de garantir la cohérence
- Affichage des récipients : lors de l'utilisation d'un objet de données de base, les utilisateurs voient dans EasyTouch le récipient attribué de manière fixe ou un récipient sélectionné manuellement. Cela réduit le risque de confusion et améliore la précision de l'opération
- Choix du récipient : les utilisateurs peuvent également sélectionner un récipient directement dans l'opération de pesée sans spécification préalable, par exemple en scannant l'ID du récipient au moyen d'un code barres. Cela permet d'éviter les erreurs de tare

Informations sur la licence

- Portée de la licence : Une licence peut être utilisée sur un terminal (PC, ordinateur portable, tablette Android)

VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- le programme de base SET-01 Base est nécessaire pour cette set

PICTOGRAMMES

De série



Option



Aperçu des pictogrammes KERN



EasyTouch : convient pour la connexion, transmission et contrôle de données via PC ou tablette



Gestion centralisée des utilisateurs pour les fonctions de KERN EasyTouch. Des données de base, telles que le nom, le prénom, la photo, peuvent être associées à un utilisateur. Chaque utilisateur se voit attribuer un rôle utilisateur disposant de droits configurables individuellement dans l'appli KERN EasyTouch. Cette structure permet de créer des utilisateurs standard, des utilisateurs superviseurs, etc. Un nom d'utilisateur et un mot de passe permettent de se connecter à l'appli KERN EasyTouch.



Cette mémoire stocke toutes les données de pesée et de mesure imprimées et enregistrées. L'enregistrement se fait sur l'appareil d'analyse local ou dans un répertoire serveur central pour tous les systèmes de pesée raccordés (Save Data Server ou Save Data Cloud). Les données dynamiques peuvent à tout moment être consultées, imprimées et exportées sous forme de tableau.



Toutes les données en mémoire sont protégées contre les falsifications. Les modifications des données de base sont également enregistrées dans la mémoire de données dynamique et protégées contre les falsifications (Data Traceability)



Qualification des appareils : système de qualification conforme aux normes comprenant les services de validation suivants : qualification d'installation (IQ), qualification de fonctionnement (OQ)



Fonction de mémoire de données centrale pour l'enregistrement supplémentaire de toutes les données de mesure dans un répertoire serveur central local. Les données de mesure de tous les systèmes de pesée raccordés par KERN EasyTouch et de toutes les fonctions KERN EasyTouch installées y sont stockées. Ceci permet notamment aux utilisateurs disposant de plusieurs systèmes de pesée de réunir toutes les données de pesée dans une même base de données et de rechercher les données individuelles de différentes balances dans un même tableau. L'enregistrement des données Save Server est également protégé contre les modifications et les falsifications.